

F&P SleepStyle アプリ登録方法


Step1 : F&P SleepStyleのダウンロード

- ・カードのQRコードをスマートフォンのカメラで読み取り、アプリをダウンロード



Step2 : アカウント登録

- ・アプリを開き、「登録」を押す
- ・カードに記載された「アクティベーションコード」を入力し、送信
- ・ユーザー情報（姓名、生年月日、メールアドレス、パスワード）を入力
- ・利用規約に合意し、「承諾」を押す

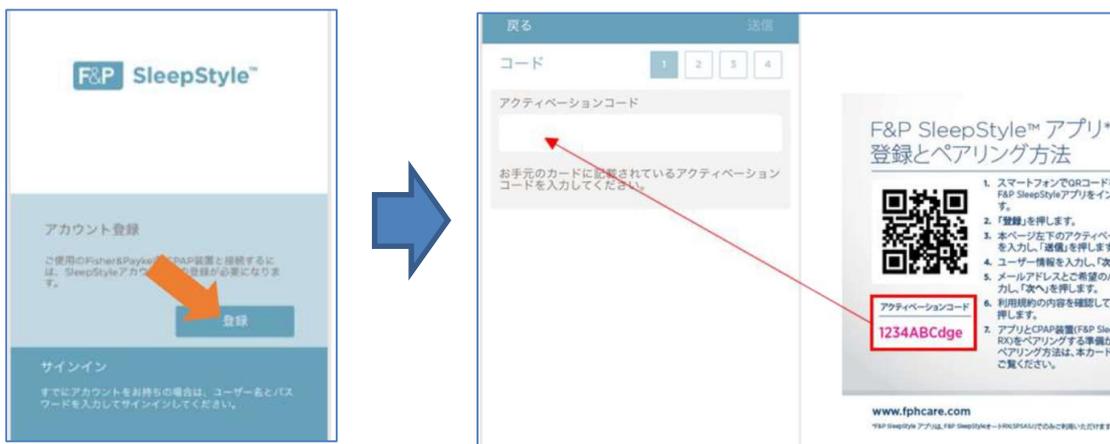

Step3 : BluetoothでCPAPをペアリング

- ・スマートフォンのBluetooth設定がオンになっていることを確認
- ・CPAP本体のコンセントを一度抜き、挿し直す（ペアリング可能時間：本体が通電し直してから15分以内）
- ・アプリ画面の「ここをタップしてCPAPを検索します」をタップ
- ・画面に「SleepStyle_XXXX」が表示されたらタップ ※「XXXX」は底面記載のシリアル番号
- ・画面に表示されたの「ペアリング」をタップ



(裏面へ続く)

- ・ CPAP装置画面に表示された**数字4桁**のPINコードを、スマホの「装置PINコード」欄へ入力



- ・ ペアリングが完了

※すでにCPAP本体に治療データが保存されている場合、右のようにスマートフォン画面上で過去の記録を確認することができます。

